


ESTRATTORE SOXHLET : CORPO CENTRALE

Cod. 01.0870.38

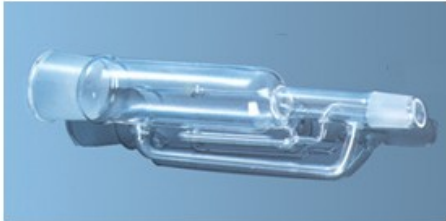

CORPI CENTRALI PER SOXHLET, ML 30, CONO F. 29/32 - CONO MASCHIO NS 29/32

Descrizione

L'estrattore di Soxhlet viene usato nella determinazione dei grassi liberi e totali negli alimenti, analisi dei pesticidi, dei legni e delle plastiche.

L'estrazione avviene riscaldando il solvente contenuto nel matraccio, dopo che il campione è stato posto nel ditale filtrante nell'interno dell'estrattore.

I vapori sviluppati dal calore salgono lungo il tubo laterale, entrano nel corpo centrale per poi salire nel refrigerante.

Nel refrigerante si condensano e ricadono allo stato liquido nel ditale, riempiendo mano a mano l'estrattore fino al livello del sifone, il quale a sua volta scaricherà il liquido nel matraccio.

Corpo centrale, raccordo conico inferiore NS 29/32

Dati Tecnici

| | |
|-------------------------|-------|
| Capacità (ml) | 30 |
| Capacità matraccio (ml) | 50 |
| Cono (NS) | 29/32 |

Varianti

| Codice | Prodotto | Capacità (ml) | Capacità matraccio (ml) | Cono (NS) |
|--------|----------|---------------|-------------------------|-----------|
|--------|----------|---------------|-------------------------|-----------|

| | | | | |
|------------|--|------|------|-------|
| 01.0870.38 | ESTRATTORE SOXHLET : CORPO CENTRALE | 30 | 50 | 29/32 |
| 01.0870.51 | CORPO CENTRALE | 70 | 100 | 34/35 |
| 01.0870.57 | CORPO CENTRALE | 100 | 250 | 45/40 |
| 01.0870.64 | CORPO CENTRALE | 150 | 250 | 45/40 |
| 01.0870.69 | CORPO CENTRALE | 200 | 500 | 55/45 |
| 01.0870.73 | CORPO CENTRALE | 250 | 500 | 55/45 |
| 01.0870.79 | CORPO CENTRALE | 500 | 1000 | 60/46 |
| 01.0870.88 | CORPO CENTRALE | 1000 | 2000 | 71/51 |
